


サービスガイド

ベッド用アーム

このサービスガイドは修理技術者を対象とした技術資料です。

保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡し下さい。

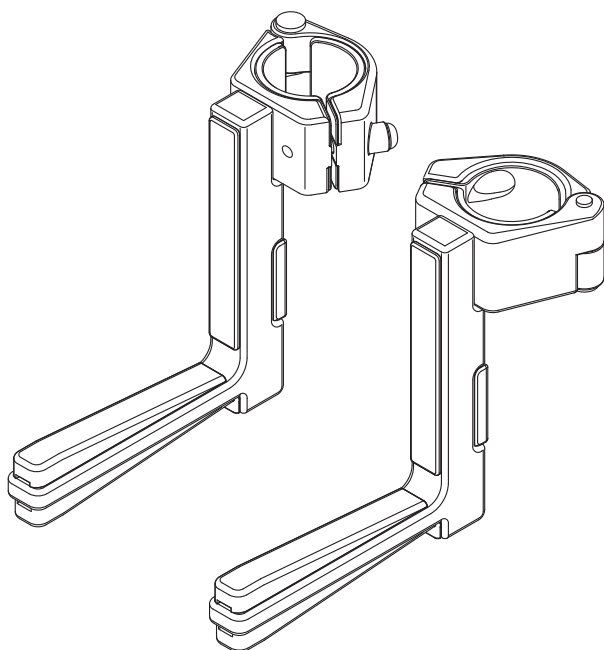

品番 / 品名

品 番	品 名
PN-L80511	ベッド用アーム

発売年月

2018 年 10 月

技術サービス区分

持 込

製品特徴

1. ベッドサイドで手すりを使用する際に安定性を向上させることができます。
2. 床面からベッドサイドフレーム下端までの高さが 4.5 ~ 30cm のベッドに対応できます。

本機の外観、仕様、使用部品は性能向上、その他の理由により予告なく変更することがあります。
本書の著作権は弊社に帰属します。本書の内容を弊社に無断で複製、転用等およびネットワークで配布することを禁止します。

パナソニック エイジフリー株式会社

安全に関するご注意 必ずお守りください

■修理前にこのサービスガイドを必ずお読みのうえ、正しく修理してください。

■このサービスガイドに記載されていない方法で修理されて、それが原因で事故や故障が生じた場合は、保証を致しかねますのでご注意ください。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

 禁止	●本書に明記されている箇所以外の分解・修理・改造は行わない (故障、破損によるけがの原因) ●ストーブなどの火気類に製品を近づけない (火災や変色・変形の原因)
 必ず守る	●分解・修理は安定した作業台などで行う (思わぬ事故、けがの原因)




注意

 禁止	●ボルト・ナット締めにサイズの合わない工具を使用したり、乱暴に締めつけたりしない (ボルト・ナットの頭などのバリ(突起)による怪我の原因) ●フレームストッパーを持って持ち運びしない (外れによるけがの原因)
 必ず守る	●分解・修理後は、本書の「修理完了検査項目」を確認する (故障、破損、事故、けがの原因) ●すき間に手指などを挟まないように注意する (事故、けがの原因) ●指定トルク以上で締め付けを行う (アーム外れ、事故の原因)

仕様

製品名	ベッド用アーム
製品品番	PN-L80511
質量	0.9kg (1個 0.45kg)
サイズ	長さ 19.1 × 幅 9.2 × 高さ 14.5cm
材質	固定部・アーム : アルミニウム フレームストッパー・スペーサー : 合成ゴム 支柱緩衝カバー : ポリプロピレン
最大使用者体重	100kg

各部のなまえ

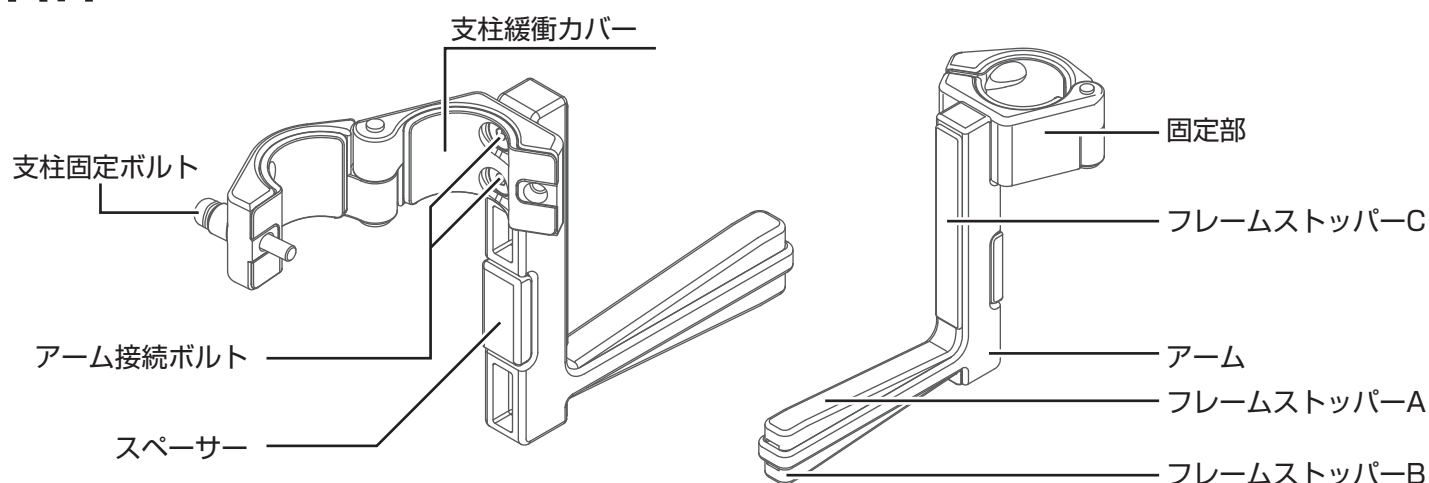


お願い

● 六角レンチ（呼び4、呼び5）をご準備ください。※すっきり手すり クリンディに付属

- ・「アーム接続ボルト」には 呼び4 の六角レンチをご使用ください。
- ・「支柱固定ボルト」には 呼び5 の六角レンチをご使用ください。

付属品

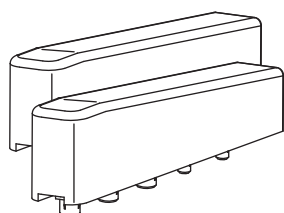


※フレームストッパーAと
付け替えて使用する為の
部品です。

フレームストッパーP
2個

分解・組立方法

ベッド用アームの分解・組立作業は、
クリンディから取り外して行ってください。


1. 固定部・支柱緩衝カバーを取り外す

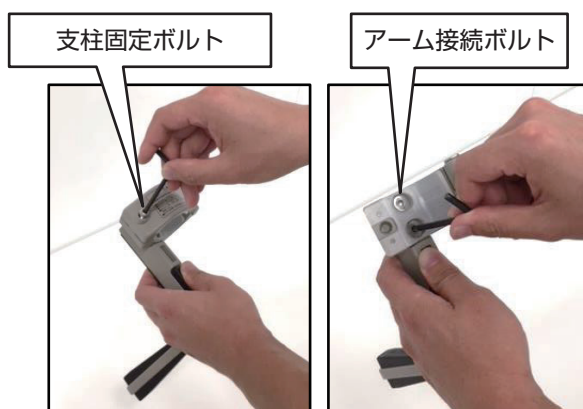

① 固定部を取り外す

支柱固定ボルトを外して固定部を開いてください。
※六角レンチ(呼び5)をお使いください。

アーム接続ボルト2本を外し、アームから固定部を
取り外してください。
※六角レンチ(呼び4)をお使いください。

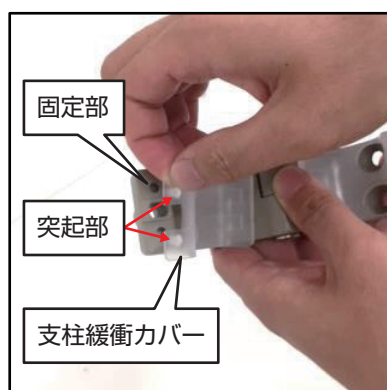


② 支柱緩衝カバーを取り外す

支柱緩衝カバーの突起部分を固定部から抜き、
支柱緩衝カバーを取り外してください。

※固定部1個につき2個の支柱緩衝カバーを
取り外してください。

突起部付近に指を引っ掛けると外しやすくなります。

2. スペーサーを取り外す

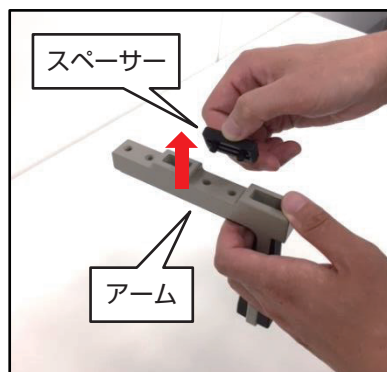

スペーサーの側面を持ってアームから
引抜いてください。

分解・組立方法


3. フレームストッパー (A・B・P) の交換



① フレームストッパーを取り外す

フレームストッパーを引抜いて取り外してください。

※左記写真はフレームストッパー A です。
フレームストッパー B 又は P の場合も、
A 同様の方法で取り外してください。

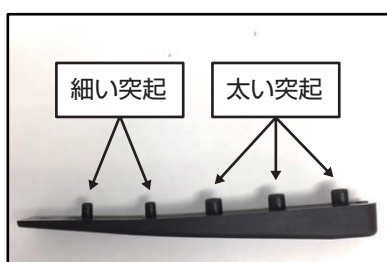

② フレームストッパーを取り付ける

フレームストッパーの突起をアームの穴に
差し込んでください。


■差し込み方

1. すべての突起の先端がつぶれていないことを確認する
2. 2本の細い突起部をアームの穴に半分まで差し込む
3. 3本の太い突起部をアームの穴に半分まで差し込む
4. 全体を一様に押し入れる


→すべての突起を一気に差し込むと突起先端がつぶれる
可能性があります。

⚠ 注意

- 突起の先端がつぶれていないか
確認する
→突起がつぶれたものを使用すると、
すき間ができ、正しく差し込めな
くなります。

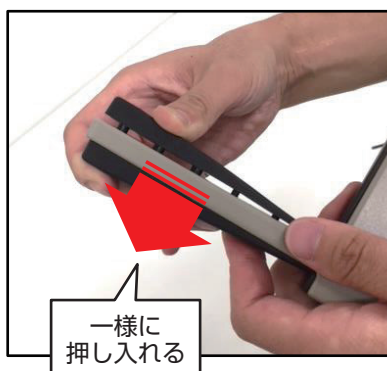

4. フレームストッパー C を取り外す

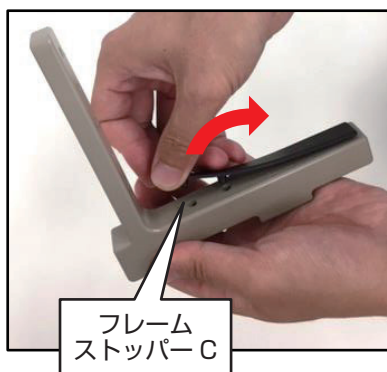

フレームストッパー C を引抜いてアームから
取り外してください。

修理完了検査項目

No.	確認項目	対応	チェック
1	各固定ボルトの緩みがないことを確認する。	各固定ボルトを締め付けてください。	
2	各部品の欠損、ボルト頭にシャープエッジがないことを確認する。	新しい部品、ボルトに交換してください。	
3	フレームストッパーの突起につぶれなどの破損がないことを確認する。	新しい部品に交換してください。	
4	警告・品番ラベルがめくれなく貼り付いていることを確認する。	新しい警告・品番ラベルに交換してください。	
5	ベッドサイドフレームに取り付けた際に負荷をかけガタツキがないことを確認する。	各固定ボルトを締め付けてください。	
		ベッド用アームの取り付け位置をすき間のないように調整してください。	
		ベッドサイドフレームの高さに応じた組立手順で組立を行ってください。	

部品展開図

左側


右側の部品展開図は次の頁

※左右反転する部品がございます。

→固定部 ②

警告シール ⑭ / ⑮

品番シール ⑬

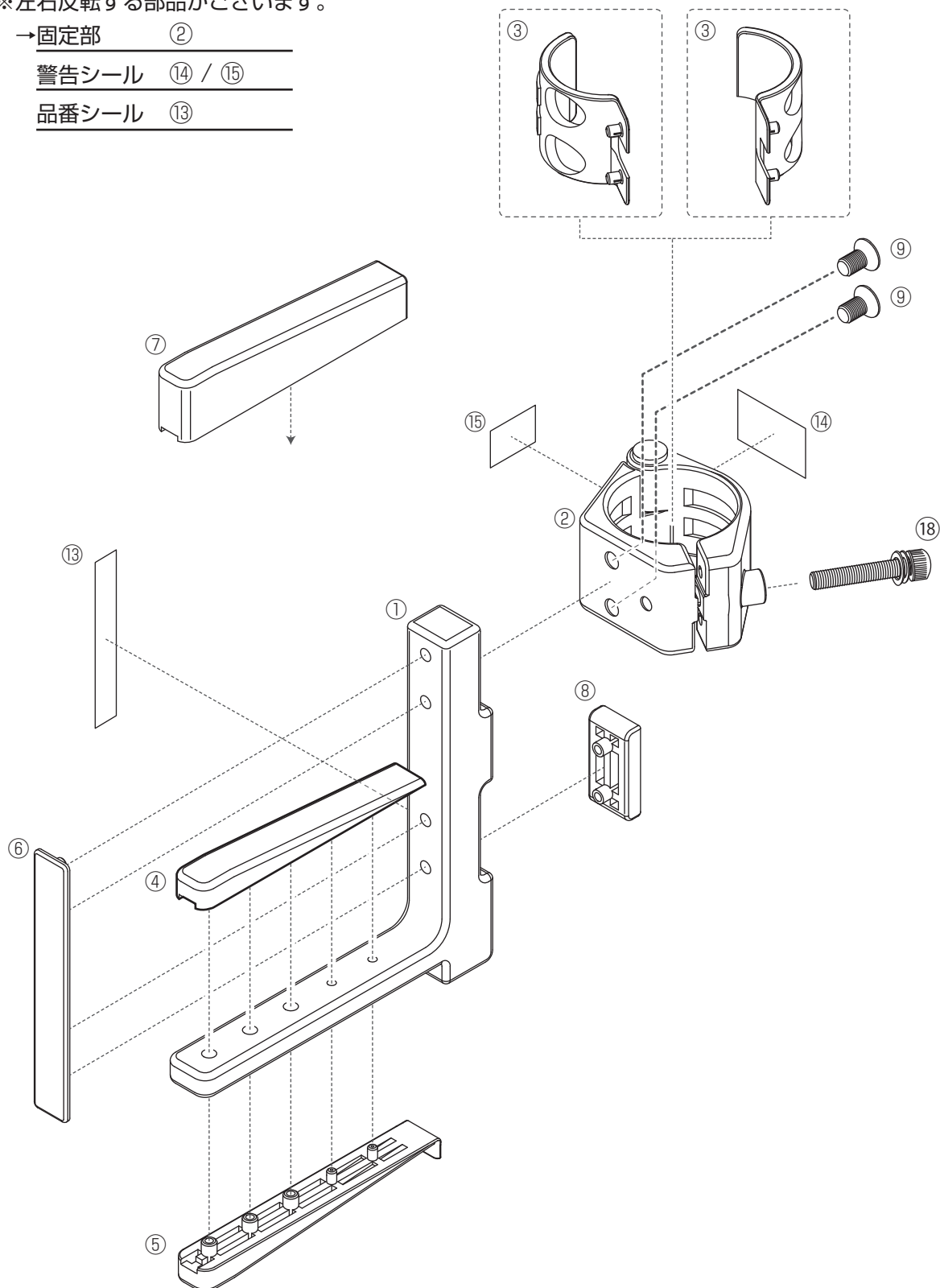

部品展開図

A

B

C

D

E

右側


左側の部品展開図は前の頁

※左右反転する部品がございます。

→固定部 ②

警告シール ⑭ / ⑮

品番シール ⑬

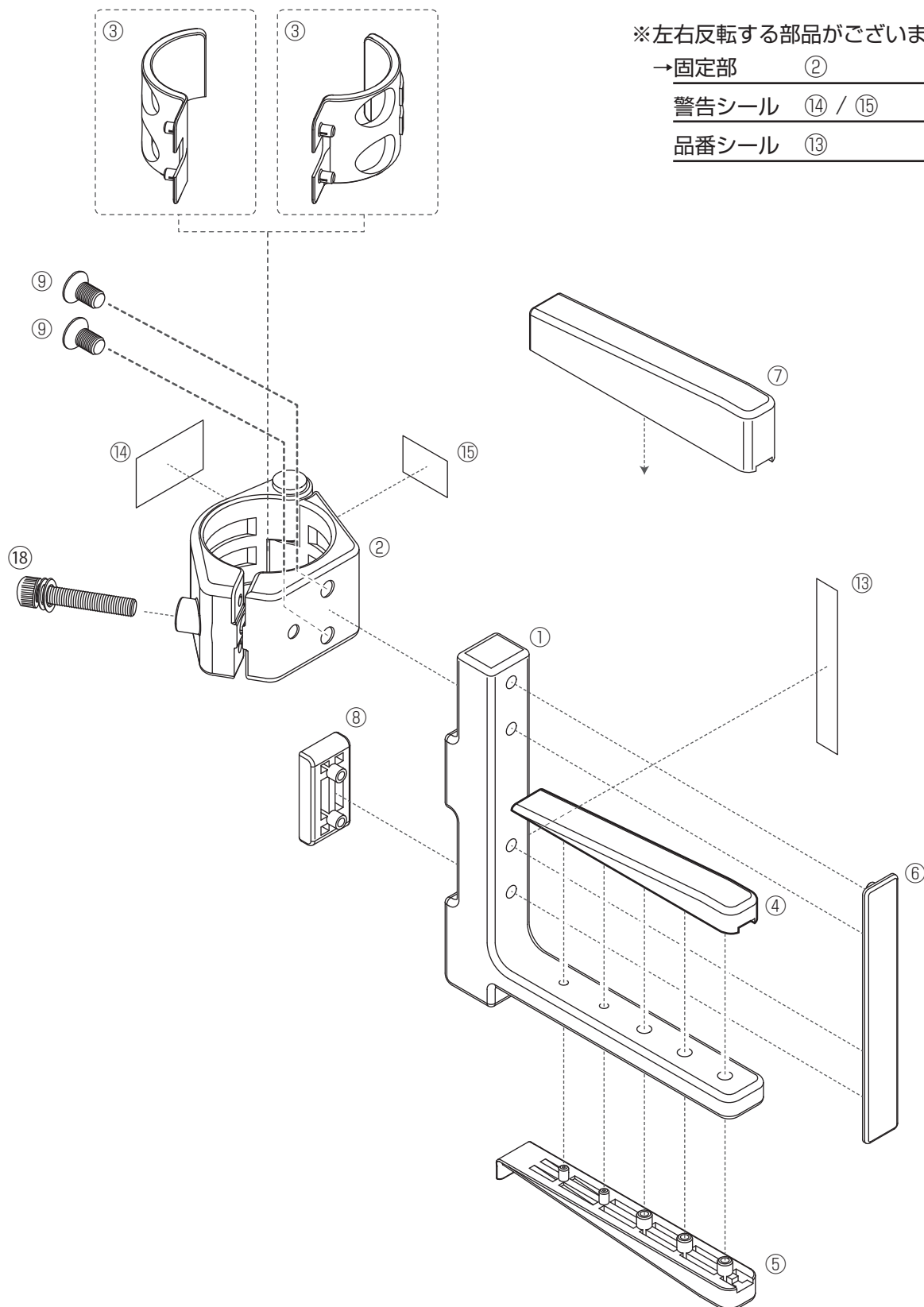

部品表

この価格に表示されている表示価格は消費税抜きです。

図面 番号	補助 番号	品名	ご注文品番	箱 入数	希望小売価格	摘 要・備 考	1 台 個数
1		アーム	—	—	-	供給不可	2
2		固定部	—	—	-	供給不可	2
3		支柱緩衝カバー	PN-L8051101P	4	1,520		4
4		フレームストッパー A	PN-L8051102P	2	1,520		2
5		フレームストッパー B	PN-L8051103P	2	1,520		2
6		フレームストッパー C	PN-L8051104P	2	1,520		2
7		フレームストッパー P	PN-L8051105P	2	1,520		2
8		スペーサー	PN-L8051106P	2	1,270		2
9		アーム接続ボルト	PN-L8051107P	10	1,520		4
13		品番シール	PN-L8051111P	1	380		2
14		警告シール①	PN-L8051112P	1	380		2
15		警告シール②	PN-L8051113P	1	380		2
16		梱包箱	PN-L8051114P	1	1,900		1
17		取扱説明書	PN-L8051115P	1	380		1
18		支柱固定ボルト	PN-L8051116P	1	760	ワッシャー・スプリングワッシャー付	2

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地