


この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。

発行 2026年10月（第5版）No.85


玄関用自在手すりツインディ

●品番


XPN-L80201 両手すり踏み台付き	XPN-L80203 片手すり踏み台付き
XPN-L80202 両手すり踏み台なし	XPN-L80204 片手すり踏み台なし

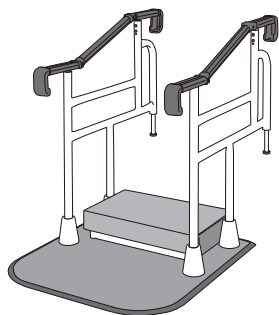


XPN-L80201
両手すり踏み台付き

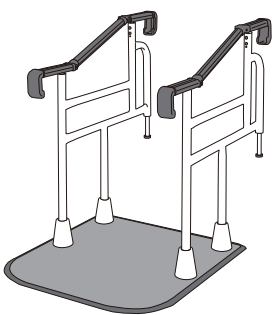

XPN-L80202
両手すり踏み台なし

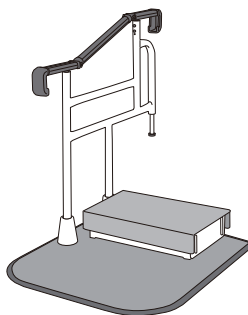

XPN-L80203
片手すり踏み台付き

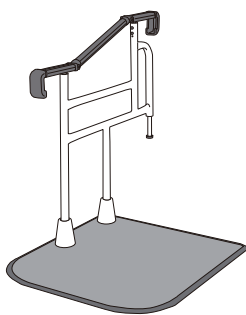

XPN-L80204
片手すり踏み台なし

定 格

発売年月	技術サービス区分
平成26年 09月	持 込

製 品 名	玄関用自在手すりツインディ		
製 品 品 番	XPN-L80201 両手すり踏み台付き XPN-L80202 両手すり踏み台なし XPN-L80203 片手すり踏み台付き XPN-L80204 片手すり踏み台なし	製 品 質 量	43.5kg (両手すり踏み台付き) 35kg (両手すり踏み台なし) 36kg (片手すり踏み台付き) 27.5kg (片手すり踏み台なし)
サ イ ズ	ベース寸法	幅72.5×奥行77cm	
	手すり高さ(土間側)	ベース面より 72.5～82.5cm(2.5cmピッチ)	
	手すり高さ(かまち側)	土間床面より 88.5～118.5cm(2.5cmピッチ)	
	対応かまち高さ	16～36cm	
	踏み台寸法	幅51×奥行き30cm	
	踏み台寸法	10.8～18cm(1.8cmピッチ5段階調整)	
材 質	ベース・手すりフレーム：スチール ベース縁ゴム：合成ゴム 手すり構造部材：アルミニウム 手すり被覆部：合成ゴム 支柱カバー：ポリプロピレン ジョイント：ポリアセタール	端部キャップ：ポリブチレンテレフタレート マット：合成ゴム 踏み台：スチール カーペット：表面 ポリエステル 裏面 アクリル樹脂	


目 次

部品展開図・価格表	1～5
各部品の交換方法	6～7

※サービスガイドの記載内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

玄関用自在手すりツインディ 部品展開図・価格表

1. 部品展開図

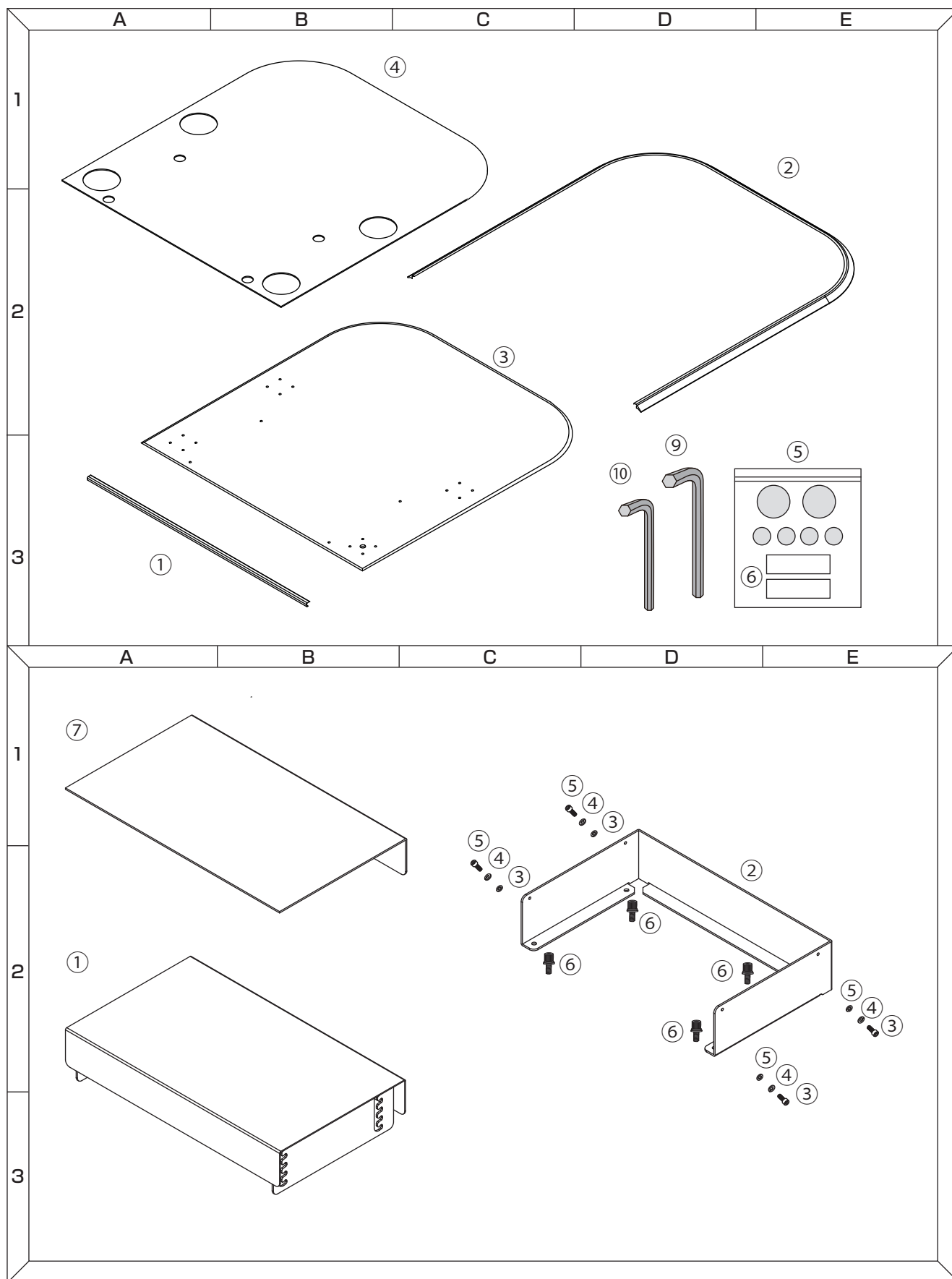

2. 部材価格表

玄関用自在手すりツインディ PN-L80201 (ベース)

この価格に表示されている表示価格は消費税抜きです。


図面 番号	補助 番号	部品名	ご注文品番	箱 入数	希望小売価格	摘 要・備 考	1台 個数
1		ベース縁材(かまち側)	PN-L8020101P	1	2,280		1
2		ベース縁材(土間側)	PN-L8020102P	1	2,790		1
3		ベース縁材付	PN-L8020103P	1	29,730		1
4		マット	PN-L8020104P	1	7,970		1
5		穴ふさぎカバーセット	PN-L8020105P	1	300		1
6		両面テープ	PN-L8020106P	1	280	カット品	1
7		瞬間接着剤	PN-L8010031P	1	2,530	20g入り	1
8		補修塗料(ベース用)	PN-L8010030P	1	3,450		1
9		六角レンチ(呼び5)	PN-L8010021P	1	460		1
10		六角レンチ(呼び3)	PN-L8020109P	1	490		1
11		取扱説明書	PN-L8020110P	1	380		1
12		施工説明書	PN-L8020111P	1	380		1
13		梱包箱	PN-L8020112P	1	1,900		1
14		段差解消ゴム	PN-L8020100P	1	1,270		1

玄関用自在手すりツインディ PN-L80203 (踏み台)

図面 番号	補助 番号	部品名	ご注文品番	箱 入数	希望小売価格	摘 要・備 考	1台 個数
1		天板	PN-L8020301P	1	12,650		1
2		底板	PN-L8020302P	1	8,860		1
3		六角穴付きボルト(M6×16)	PN-L8020303P	4	330	高さ調整用	4
4		スプリングワッシャー(Φ6)	PN-L8010018P	4	230	高さ調整用	4
5		平ワッシャー(大径)	PN-L8020305P	4	230	高さ調整用	4
6		ワッシャー付き六角穴付きボルト	PN-L8020306P	4	420	ベース取付用	4
7		カーペット	PN-L8020307P	1	1,900		1
8		梱包箱	PN-L8020308P	1	1,270		1
9		補修塗料(フレーム用)	PN-L8010029P	1	3,450		1

玄関用自在手すりツインディ 部品展開図・価格表

1. 部品展開図

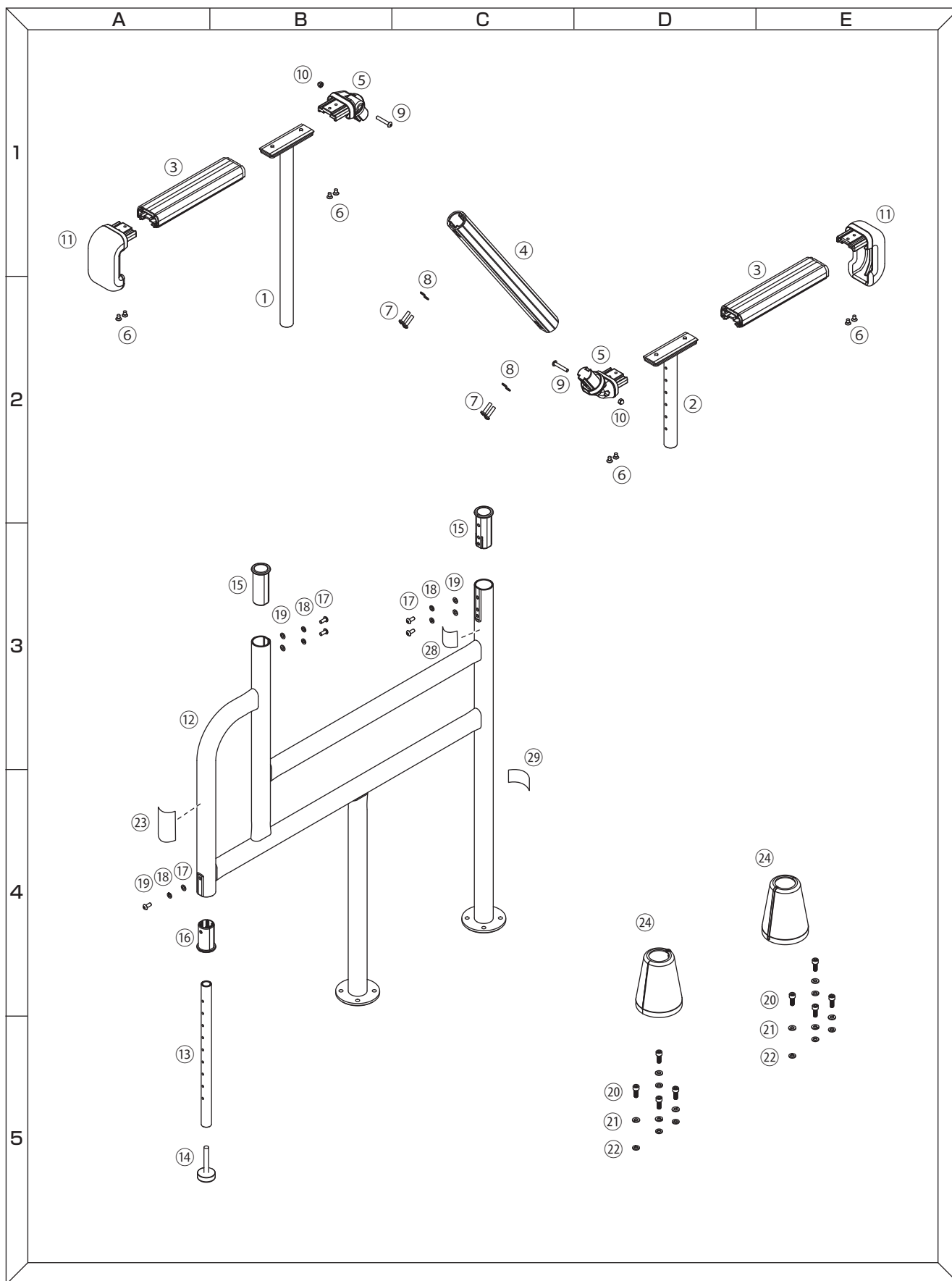

玄関用自在手すりツインディ PN-L80202(手すり)


図面 番号	補助 番号	部品名	ご注文品番	箱 入数	希望小売価格	摘 要・備 考	1台 個数
1		手すり支柱(かまち側)	PN-L8020201P	1	4,560		1
2		手すり支柱(土間側)	PN-L8020202P	1	3,420		1
3		平手すり(被覆付)	PN-L8020203P	1	2,280		2
4		丸手すり(被覆付)	PN-L8020204P	1	2,280		1
5		ジョイント	PN-L8020205P	1	2,280	平手すりジョイント・丸手すりジョイント固定ネジセット	2
6		皿小ネジ(M5×8)D9	PN-L8020206P	4	330	平手すりジョイント・端部キャップ取付用	4
7		なべ小ネジ(M5×20)	PN-L8020207P	4	330	丸手すりジョイント取付用	4
8		スプリングワッシャー(φ5)	PN-L8020208P	4	230	丸手すりジョイント取付用	4
9		六角穴付きボタンボルト(M5×40)	PN-L8020209P	2	330	ジョイント固定用	2
10		キャップ付きUナット	PN-L8020210P	2	640	ジョイント固定用	2
11		端部キャップ	PN-L8020211P	1	1,650		2
12		手すりフレーム	PN-L8020212P	1	20,240		1
13		アジャストパイプ	PN-L8020213P	1	3,800		1
14		アジャスター	PN-L8020214P	1	380		1
15		ジョイント用ブッシュ	PN-L8020215P	1	330		2
16		アジャスト用ブッシュ	PN-L8020216P	1	350		1
17		高さ調整ネジ	PN-L8020217P	5	960		5
18		スプリングワッシャー(φ5)	PN-L8020218P	5	290	高さ調整ネジ用	5
19		平ワッシャー(φ5)	PN-L8020219P	5	290	高さ調整ネジ用	5
20		六角穴付ボルト(M6×12)	PN-L8010017P	4	330	手すりフレーム取付用	8
21		スプリングワッシャー(φ6)	PN-L8010018P	4	230	手すりフレーム取付用	8
22		平ワッシャー(φ6)	PN-L8010019P	4	230	手すりフレーム取付用	8
23		警告ラベル	PN-L8020223P	1	260		1
24		支柱カバー	PN-L8010020P	1	510		2
25		補修用塗料(フレーム用)	PN-L8010029P	1	3,450		1
26		ネジロック	PN-L8010032P	1	6,330		1
27		梱包箱	PN-L8020127P	1	5,440		1
28		ネジ注意シール	PN-L8020128P	1	260		1
29		メンディハツインディネジ警告シール	PN-L8030012P	1	130		1

各部品の交換方法

1. 端部キャップの交換方法

●取りはずし

- ① プラスドライバー No.2 をご用意ください。
平手すり裏面のネジ2箇所をはずしてください。

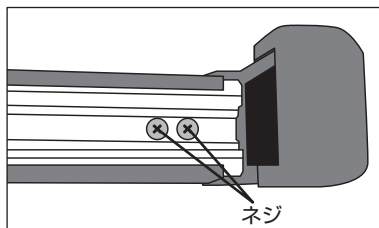

●取り付け


- ① 平手すりに端部キャップを挿入し、平手すり裏面のネジ2箇所を取り付けてください。
(推奨締め付けトルク：1.5N.m)
ネジを再度使用する場合は、必ずネジロックを塗布した上でネジを取り付けてください。
(推奨ネジロック：ヘンケルロックタイトネジ止め LOCTITE242)

2. ジョイントの取り外し


●取りはずし

- 下記に記載の工具をご確認ください。
・六角レンチ（呼び3）・プラスドライバー No.2



- ① 六角レンチ（呼び3）を使用し、かまち側、土間側の手すりの高さ調整ネジ（4箇所）を外して手すりを高さ調整支柱ごと抜き取ってください。

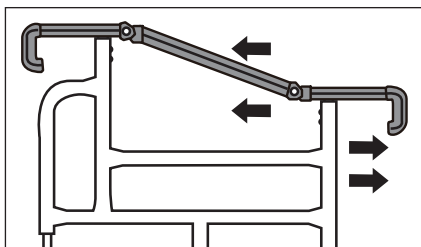

- ② 平手すりの裏側のネジ2箇所を外してください。

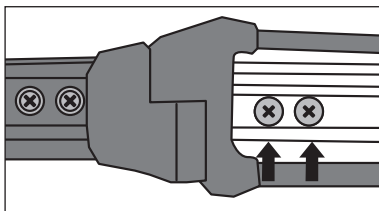

- ③ 丸手すりの裏側のネジ2箇所を外してください。

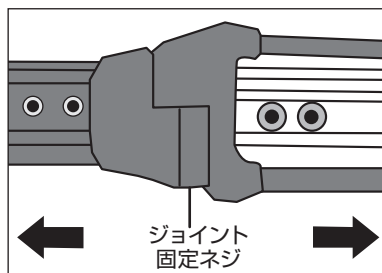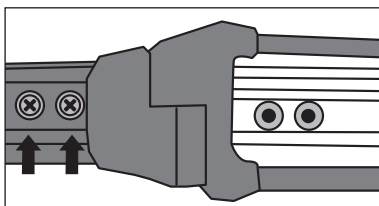


- ④ 手すりを引き抜くとジョイントが外れます。


※ ジョイント固定ネジはゆるみ止めナットを使用しており、一度ネジを取り外してしまうと適正な機能を発揮しないため、ジョイント固定ネジは外さないで下さい。

- ⑤ 取外しと逆の手順で取り付けてください。

※ 丸手すりジョイント固定ネジは、スプリングワッシャーの入れ忘れに注意してください。
(推奨締め付けトルク：2N.m)

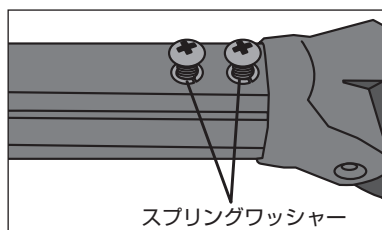


※ 平手すりジョイント固定ネジは、必ずネジロックを塗布してください。(推奨締め付けトルク：1.5N.m)
(推奨ネジロック：ヘンケルロックタイトネジ止め LOCTITE242)

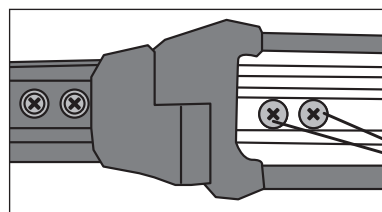

3. 平手すりの交換

- ① (2-①)・(2-②)の方法で平手すりジョイント固定ネジを外してください。

- ② ジョイントから平手すりを引き抜いてください。

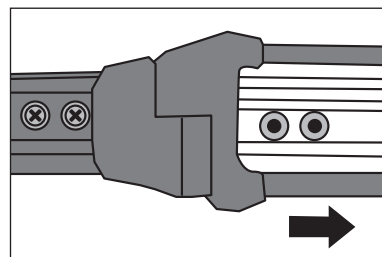


調整支柱の交換方法


4. 丸手すりの交換

- ① (2-①)の方法で平手すりジョイント固定ネジを外してください。

- ② 丸手すり両側のネジ(4箇所)を外してください。

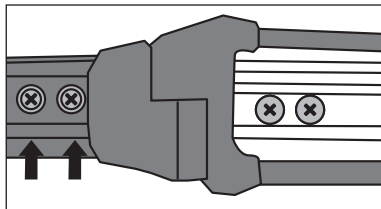

- ③ ジョイントから丸手すりを抜きます。交換後、取外しの逆の手順で取り付けを行ってください。

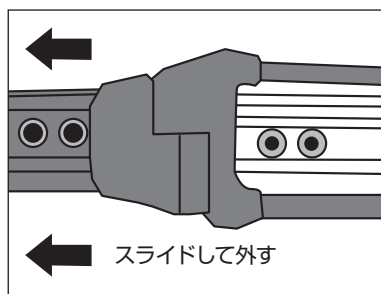


※ 丸手すりジョイント固定ネジは、スプリングワッシャーの入れ忘れに注意してください。

5. 高さ調整支柱の交換

下記に記載の工具をご用意ください。
・六角レンチ(呼び3)・プラスドライバー No.2

●取りはずし


- ① (2-①)・(2-②)の方法で平手すりジョイント固定ネジを外してください。
- ② 1に記載の方法で端部キャップを取り外して下さい。
- ③ 手すり固定ネジをゆるめ、手すり支柱を端部キャップが取り付けいていた方向へスライドさせ、外して下さい。

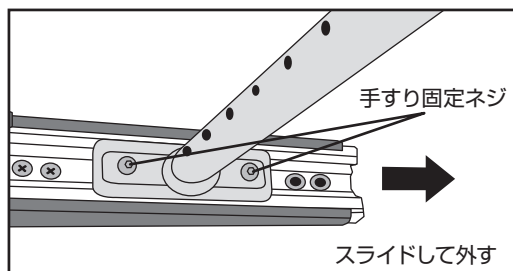

※ 手すり固定ネジは外れにくく、加工しています。無理に外そうとすると部品が破損するおそれがあります。

6. 高さ調整支柱の取り付け方

- ① 手すり固定ネジがゆるんでいることを確認し、手すり固定プレートとスライド固定プレートのすき間に、平手すりフレームを差し込みます。

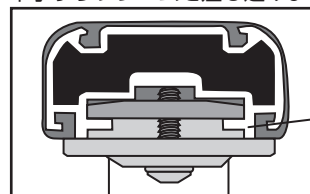


手すりフレームを間に入れる。

- ② 取外し方の逆の手順で、端部キャップを取り付けます。
- ※ ネジを再度使用する場合は、必ずネジロックを塗布してから、ネジを取り付けてください。
(推奨ネジロック：ヘンケルロックタイトネジ止め LOCTITE242)

7. マットの交換方法

ベースのイラストの位置に指定の両面テープの白色のはくり紙をはがし、貼り付けてください。

剥離紙をはがす前に、マットをベースに乗せ、位置あわせを行ってください。位置が決まりましたら、はくり紙をはがしてマットとベースと貼り付けてください。

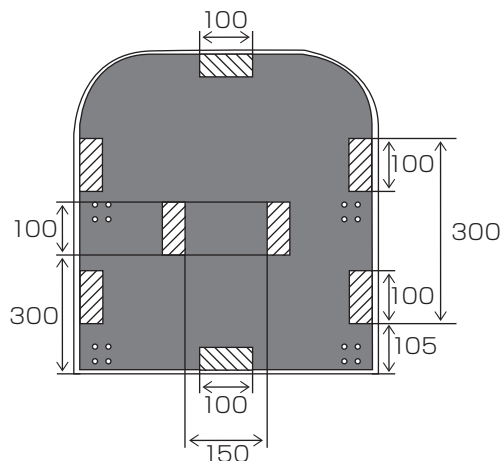

8. ベース縁材の交換

●取りはずし

- ① 熱湯(約80度)をベースの縁材にかけて、竹べらなどを使用しベース縁材を取り外して下さい。

●取り付け

- ① ベースを裏面にしてください。
(品番ラベルが付いている方が裏面です。)
- ② ベース縁材とベースの間に接着材を塗布し、縁材を貼り付けてください。裏面が終わったら、表面も同様に接着材を塗布しながら接着します。
(推奨接着材：アロンα エクストラ2000)

